

Blutbank-Kühlschrank LabStar Sanguis LSSA

- Umluftsystem, autom. Abtaung und Tauwasserverdunstung
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler
 - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Alarm bei Netzausfall
 - Alarm bei Fühlerfehler
 - Türalarm
 - Integrierter Datenlogger
 - USB - Schnittstelle für Datendownload
 - Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz und weißer PVC-Lackierung
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtung auswechselbar
- 2 Schubladen mit Teleskopauszug
- Innenraum aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 4 Rollen, 2 Stellfüße hinten



LabStar Sanguis LSSA1104GEWU

Modell LabStar Sanguis LSSA1104GEWU

Temperaturbereich	°C:	+2/+6
Inhalt	Liter brutto	100
Außenmaße (BxTxH)	mm:	600x600x850
Innenmaße (BxTxH)	mm:	475x440x460
Tiefe bei geöffneter Tür	mm:	1135
Schubladen	:	2
Anzahl Blutbeutel à 450 ml		64
Gewicht	kg:	80
Netzanschluss	:	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Versandmaße (BxTxH)	mm:	680x680x1050
Versandgewicht	kg:	91
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	:	R134a



Schubladen mit Teleskopauszug

LabStar Sanguis + Zubehör: Außen / Innen Art.-Nr.

LabStar Sanguis LSSA1104GEWU	weiß, Glastür / CNS	GSLSSA1104GEWU
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).		GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).		a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.		ZXX2-020-2L
SMS Alarm (an max. 5 Mobilrufnummern).		a.A.
Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck.		a.A.
Trennteiler für Schublade. 1 Set bestehend aus 3 Teilern.		ZLSSA4-010
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.		ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.		
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.		ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.		ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.		
Exportausführung mit Sonderspannung /-frequenz.		a.A.


ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssysteme

Edelstahl-Einschübe, Einfrierkassetten und Raster-einsätze ermöglichen das übersichtliche Aufbewahren und zielsichere Wiederfinden des Probenmaterials. Die Lagerkapazität wird optimal genutzt.

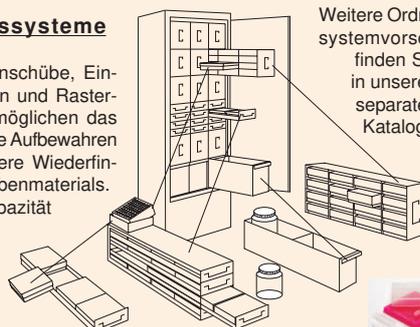

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



MIN/MAX Thermometer mit zusätzlichem Temperaturfühler